



PROCEDURE

Trasporti neonati - Presidio

EMITTENTE	Direzione dei Servizi
DESTINATARI	Corpo Militi
PERCORSO	<div>Procedure</div> <div>⇒ Presidi Sanitari</div> <div>⇒ Uso Cinture Neonati</div> <div>Procedure</div> <div>⇒ Servizi</div> <div>⇒ Trasporti pediatrici</div> <div>⇒ Uso Cinture Neonati</div>
DATA AGGIORNAMENTO	20 febbraio 2019

Al fine di garantire la massima sicurezza nel corso di trasferimenti di pazienti neonati, è reso disponibile una culla di emergenza, denominata Infant Transport Unit. Il presidio sanitario è posto sulla mensola metallica situata nel soppalco dell'officina (primo box vicino all'ingresso di corso Bolzano – vedi Fig. 1).

L'Infant Transport Unit è una culla progettata e realizzata per il trasporto di pazienti neonati **(da 0 a 4,5 kg).**

La culla, una volta estratta dall'apposita borsa di trasporto, va posizionata sulla barella e assicurata attraverso le cinture di sicurezza della barella stessa, che andranno fatte passare attraverso le apposite asole. Una volta sollevate le parti laterali e chiuse le cerniere relative, la culla è pronta per l'uso.

Ulteriori istruzioni più dettagliate nella Fig. 2.

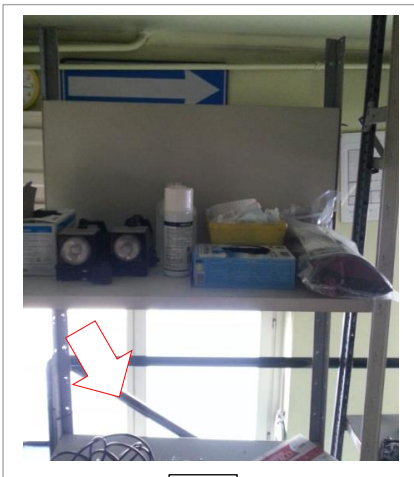


Fig. 1



INFANT TRANSPORT UNIT

CULLA D'EMERGENZA PER IL TRASPORTO DEL NEONATO IN SICUREZZA IN AMBIENTE CALDO E PROTETTO

La INFANT TRANSPORT UNIT è una culla d'emergenza ripiegabile e facilmente trasportabile, realizzata in tessuto Cordura. Viene fornita piegata in una borsa con maniglie di trasporto. Completa di cinghie interne per il fissaggio del paziente.

NON È UN'INCUBATRICE, ma unicamente un dispositivo per il trasporto di neonati.
Non adatto al trasporto di dispositivi medici non fissati al suo interno.

Modalità d'uso

- Estrarre la culla dalla borsa di trasporto.
- Posizionarla sulla barella o su un piano rigido.
- Sollevare le parti laterali.
- Chiudere le cerniere laterali per rendere la culla pronta all'uso.
- Aprire le cerniere superiori.
- Inserire il materasso, quindi posizionare il neonato e fissarlo con le apposite cinghie.
- Chiudere le cerniere superiori lasciando una piccola apertura.
- Inserire quindi la borsa di trasporto in una delle tasche laterali.



Trasporto

- Utilizzare le maniglie laterali per trasportare la culla con il paziente.
- Per il trasporto si consiglia l'impiego di due persone.



Trasporto in ambulanza

- Posizionare la culla d'emergenza sulla barella.
- Inserire le cinture di sicurezza in dotazione alla barella nelle apposite asole presenti sotto la culla d'emergenza e fissarle bene.
- Per la sicurezza di pazienti e utilizzatori si invita ad ancorare in modo ottimale la culla d'emergenza alla barella.



Controllo del paziente

- Tre lati in materiale trasparente permettono il completo e continuo controllo del neonato da parte del personale.

Cura e manutenzione

- Dopo l'utilizzo pulire la culla d'emergenza, ripiegarla con cura evitando pieghe anomale e inserirla nella apposita borsa.
- In caso di contaminazione della culla agire secondo la prassi ospedaliera, ricordando che il materiale Cordura può essere lavato a non più di 30°.
- Le cerniere devono essere periodicamente trattate con spray siliconico per preservarne lo scorrimento.
- Dimensioni aperta: cm. 90x38x34,5h. Dimensioni chiusa cm 90x38x15h.
- Peso massimo trasportabile: 20 Kg



Emergency Medical Systems

Via Enzo Ferrari 26, 38100 Bolzano (I)
Tel. +39 0471 952883 - Fax +39 0471 770140
info@boscarol.it
www.boscarol.it

Fig. 2